

THERAPIELIEGEN

ato form<sup>gmbh</sup>

...mehr Lust am Leben

präsentiert



- UnionBOBATH
- UnionTherapy
- Sinthesi
- UnionTest
- TiltTable
- ShowerStretcher



Die Modelle LB1210, LB2210, LB2212, LB1410, LB1510 und LB1610 mit verstellbarem Kopfteil.




Neigungsverstellung beim Modell LB1610 von 0 bis -20°.



Verstellmöglichkeit des Beinsegments beim Modell LB1510.

## Polsterfarben

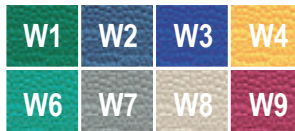

## Behandlungsliegen der Serie **UnionBobath**

Die großformatige professionelle Liege eignet sich ideal für die Bobath-Therapie. Diese Liege ist elektrisch höhenverstellbar. Das Gestell zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die Liegen-Basis erlaubt einen Zugang zum Patienten bis zu 18 cm unterhalb der Liegefläche. Die Liege ist ausgestattet mit abriebfesten und feststellbaren Rädern.

### Zubehörteile und Optionen:

- Seitengitter
- Kissen mit Aussparung
- Sicherungsriemen
- Halterungen für Sicherungsriemen



Das Modell LB2312 mit seinem 3-geteiltem Kopfteil. Das mittlere Kopfteil lässt sich bis zu 90° verstellen.

Technische Daten:	1110, 1210	2110, 2112	2115, 2120	2210, 2212	2312	1410, 1610	1510
Länge				200 cm			
Breite	100 cm	100/120 cm	150/200 cm	100/120 cm	120 cm	100 cm	100 cm
Höhe				47 bis 97 cm			
verst. Kopfteil	75° (1210)	75°	75°	75°	75°	-20 bis 75°	-20 bis 75°
Verst. Fußteil						20° (1610)	75°
kompl. Neigung	-	-	-	-	-	-20° (1610)	-
Ausstattung	-	-	geteilte Liegefläche	-	Kopfteil 3-fach get.	-	Liegefläche 3-fach get.
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	250 kg	250 kg	250 kg	150 kg	150 kg



Therapieleie  
 THER 1



oben:  
 THER 2 mit 3-teiliger Liegefläche

unten:  
 Das mit Armlehnen ausgestattete Kopfteil bei den Modellen Ther 3 und THER 4.



THER 1 – Kopfteil lässt sich sowohl positiv als auch negativ neigen.



THER 2 mit dreiteiliger Liegefläche – Fuß- und Kopfteil können sowohl in positiver als auch in negativer Neigung mittels Gasfeder eingestellt werden.



THER 3 – Die beiden Armteile können unabhängig voneinander in der Höhe und im Winkel angepasst werden.



THER 4 mit 4-fach geteilter Liegefläche – Die Armteile können in der Höhe und in der Rotation manuell eingestellt werden.

Die Behandlungsliegen der Serie

## UnionTherapy

lassen sich durch einen Fußschalter elektrisch in der Höhe verstellen. Der Antrieb erfolgt durch einen 24-V-Motor. Die Mobilitätsrollen sind einziehbar. Die einzelnen Elemente lassen sich in der Neigung leicht verstellen. Die Verstellung wird durch eine Gasfeder unterstützt. Die Therapieleiegen der UnionTherapy-Serie sind bis 180 kg belastbar.

### Zubehörteile und Optionen:

- Rollenhalter für Papierauflagen
- Papierauflage 2-lagig
- Füllpolster Nase-Mund-Öffnung
- Ersatzbatterie
- Nackenkissen
- Gesichtskissen
- Zusatzpedale
- Schutzbezug
- Umlaufende Verstellungsstange
- Hydraulische Version

### Technische Daten:

Länge	200 cm
Breite	68 cm
Höhe	47 bis 97 cm
Verst. Kopfteil	+45 bis -85°
Verst. Fußteil	bis 80°
(optional)	

### Polsterfarben

W1	W2	W3	W4
W6	W7	W8	W9



LS2211 – Elektrische Höhenverstellung mittels Niederspannungspedal.



Ausführung Standard Single GH – Höhenverstellung mittels Hydraulikkolben anstelle eines Motors. Eignet sich für Räume ohne Stromanschluss.



Ausführung Standard Single GP – präzise und unmittelbare Höhenverstellung mittels Rundumschaltung. Ergonomische Bedienung ist aus jeder Position leicht zu erreichen.



LS2211 mit zweigeteilter Liegefläche.



LS2212 mit dreigeteilter Liegefläche.



LS2213 – Die Beinpartien lassen sich unabhängig voneinander einstellen.



LS2213 – Die Bein- und Unterschenkelsegmente lassen sich unabhängig voneinander einstellen.

Behandlungsliegen der Serie

## Sinthesi G

Die Bereiche der Liegen sind per doppelter Gasfeder regulierbar, um den Kraftaufwand des Therapeuten zu reduzieren wenn der Patient aufliegt und um die größtmögliche Stabilität der Liegenabschnitte zu gewährleisten. Für höchsten Komfort von Therapeut und Patient ist der Rückenbereich mit einer Nasen-Mund-Öffnung versehen. Die Liege besitzt abriebfeste, feststellbare Räder, die eine leichte Manövrierfähigkeit ermöglichen.

### Technische Daten:

Länge	205 cm
Breite	68 cm
Höhe	48 bis 100 cm
Verst. Kopfteil	70/72 bis -13°
Verst. Fußteil	-10 bis 45°
Verstellung Unterschenkel (LS2114)	-72 bis 40°
Neigung	-10 bis 13°

### Zubehörteile und Optionen:

Rollenhalter für Papierauflagen
Papierauflage 2-lagig
Ersatzbatterie
Nackenkissen
Gesichtskissen
Schutzbezug
Hydraulische Version
Umlaufende Verstellstange



LS1183 Plus Split EP  
mit einzeln verstellbaren Armteilen.

**ato form** gmbh®  
...mehr Lust am Leben  
präsentiert **CHINESPORT**



LS1171 Evo Single mit dreiteiliger  
Liegefläche.



LS1172 Evo Double EP – mit  
3-fach geteilter Liegefläche, ideal für  
Behandlungen in Sitzhaltung.



LS1173 Evo Split EP – Die Bein-  
segmente lassen sich unabhängig  
voneinander einstellen.



LS1174 Evo MI.TO.EP – Die Beinseg-  
mente und Unterschenkel lassen sich  
unabhängig voneinander einstellen.

Behandlungsliegen der Serie

## Sinthesi E

Es handelt sich hier um eine zweimotorige Untersuchungs- und Behandlungsliege mit elektrischer Höhenregulierung mittels Rundumschaltung und Niederspannungs-Druckbedienung (24 V). Der Rumpfbereich kann mit Hilfe der befestigten Druckknopfbedienung elektrisch verstellt werden. Die anderen Bereiche sind über ein servo-unterstützendes System von einer oder mehreren Gasfedern regulierbar.

Die motorbetriebene Verstellung des Rumpfbereiches ermöglicht dessen Regulierung mit Patienten in Behandlung ohne jeglichen Kraftaufwand von Seiten des Therapeuten. Der Sitz-Beinbereich besitzt eine doppelte Gasfeder, um dem Bereich größtmögliche Stabilität zu verleihen. Die Liege besitzt abriebfeste, feststellbare Räder. Für größeren Komfort von Therapeut und Patient ist der Kopfbereich mit einer länglichen Nasen-Mund-Öffnung inklusive serienmäßiger Abdeckung versehen.

### Zubehörteile und Optionen:

Rollenhalter für Papierauflagen  
Papierauflage 2-lagig  
Ersatzbatterie  
Gesichtskissen  
Schutzbezug (Single, Double)  
Armstützen  
Wandstange















### technische Daten:

Länge 207 cm  
Breite 68 cm  
Höhe 48 bis 100 cm  
Verst. Kopfteil 54 bis -52°  
Verst. Rumpf 70/72 bis -13°  
Verst. Fußteil - 10 bis 45°  
Verst. Unterschenkel (optional) -72 bis 40°  
Neigung 10 bis -13°

### Polsterfarben

WS	WT	W6	W1	WR	W2	WA	W3	WL	W7
WM	WP	WB	W8	W4	WD	WZ	WF	W9	WH

# Synthesi

Wichtige Haltungen	Beschreibung	Synthesi G				Synthesi E								
		LS2211	LS2212	LS2213	LS2214	LS1171	LS1181	LS1172	LS1182	LS1173	LS1183	LS1174	LS1184	
	Rückenlage erhöhter Kopf		○		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rücken-/Bauchlage erhöhter Rücken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rückenlage, Beine gebeugt		●		●	○	○	●	●	○	○	●	●	
	Sessel (rückstellbarer Sitz)		●		●	○	○	●	●	○	○	●	●	
	Stretching Beine					●	●	●	●	●	●	●	●	
	Gegenbeugung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Bauchlage Beugung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Negativneigung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Positivneigung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Beine rückwärts gebeugt		●		●	○	○	●	●	○	○	●	●	
	Bauchlage Arme auf Stütze						●		●		●		●	
	Separate Beine Bauch-/Rückenlage			●	●					●	●	●	●	
	Separate Beugung der Beine				●							●	●	
	Therapiestuhl						●		●		●		●	



## Polsterfarben



Behandlungsliegen der Serie

## Technische Daten:

Länge	180 cm
Breite	63 cm
Höhe	60 bis 110 cm
verst. Rücken	75°
Verst. Fußteil	- 90 bis 30°
kompl. Neigung	-7 bis 12°

## UnionTest

Diese Behandlungsliegen gibt es in feststehender Form oder als fahrbares Modell. Die Liege kann eingestellt werden für sitzende Position, Relax-Position, Trendelenburg bzw. Reserve Trendelenburg-Position. Umfangreiches Zubehör bietet vielseitige und optimale Behandlungsmöglichkeiten des Patienten oder den Einsatz bei Blutspende. Die Einstellung der Höhe ist von 60 cm bis 110 cm möglich. Die Liege ist belastbar bis 150 kg.

## Zubehörteile und Optionen:

- Rollenhalter für Papierauflagen
- Papierauflage 2-lagig
- Zusätzlicher Radsatz
- Nackenkissen
- Ersatzbatterie
- Fernbedienung
- Extra Fußpedal für Höhenverst.
- Druckhebel
- Feststellschraube für Armlehnen
- Sessel-Armlehnen
- Armauflage
- Infusionsständerhalter
- Hydraulik Version

W3

W6

W7



## Stehhilfe

## TiltTable

Die Kippverstellung der Liegefläche erfolgt stufenlos von der Liegestellung bis 85° durch einen 24-V-Elektromotor. Die Liegefläche ist je nach Modell einteilig oder in drei bzw. vier Sektionen geteilt, die Fußstützen lassen sich individuell und unabhängig voneinander von -20° bis +20° einstellen. Die Höhe der Liegefläche beträgt in horizontaler Position 56 cm. Zur Serienausstattung gehören zwei höhenverstellbare Gurte mit Klettverschluss.

## Technische Daten:

Länge	200 cm
Breite	60 cm
verst. Kopfteil	-20 bis 80 cm
Belastbarkeit	140 kg

Das Modell 2BT ist zusätzlich höhenverstellbar von 56 bis 106 cm.

## Zubehörteile und Optionen:

- Holztisch
- Sandalen
- Rumpfunterstützungen
- Unterarmunterstützungen
- Gurt
- Gurtkissen
- Füllpolster Nasen-Mund-Öffnung
- Ersatzbatterie





Duschwagen mit  
hydraulischer Höhenverstellung

## ShowerStretcher

Der ShowerStretcher ist ein multifunktionaler Duschwagen mit an allen vier Seiten gepolsterter Liegefläche. Die Höhenverstellung erfolgt hydraulisch mittels Pedal oder wahlweise per Elektromotor. Die Neigungsverstellung nach vorne oder nach hinten wird durch eine Gasfeder unterstützt. Die Liegefläche ist mit einer Drainage versehen, so dass das Wasser gut ablaufen kann. Das Gestell ist aus epoxybeschichtetem Stahlrohr gefertigt. Das Sicherungsseitengitter kann leicht mit einer Hand runter geklappt werden. Die Liegefläche ist aus feuerfestem, antibakteriellen, leicht zu reinigenden, stabilen Material gefertigt.

Der Shower Stretcher ist in vier Modellen lieferbar:

LD1H11 Höhenverstellung hydraulisch

LD1H21 Höhenverstellung hydraulisch und verstellbarem Kopfteil

LD1B11 Höhenverstellung mit 24-V-Motor

LD1B21 Höhenverstellung mit 24-V-Motor und verstellbarem Kopfteil



### Technische Daten:

Länge	195 cm
Breite	75 cm
Neigung	-13° bis 10°
Höhe	54 bis 103 cm